



Slaugivita

Lietotāja instrukcija

21.12.2010

UAB "Slaugivita"

Dubijos iela 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.lv

Ražotājs: CareofSweden

Lietotāja instrukcija

21.12.2010

Preventīvie AD matračī

Šādiem produktiem:

Optimal 5zon®

Optimal 5zon® BM

Optimal Cool

Optimal Cura

Optimal Solett

Optimal Solett BM

Optimal Sumo AD

Prima 12



Preces Nr. lietotāja instrukcija: 95-001101



Saturs

Svarīgi drošības pasākumi	3
Ievads	4
Produkta apraksts un ekspluatācijas īpašības	7
Matrača izpakošana	10
Apkopes instrukcijas	10
Pārējais	11
Piederumi	13

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms lietošanas izlasiet visas instrukcijas

Brīdinājums!

1. Produkts jālieto tikai saskaņā ar šo instrukciju un tikai atļautajās pielietojuma jomās. Produktu nedrīkst kombinēt, samontēt vai labot ar citām nekā šajā instrukcijā vai citā Care of Sweden dokumentācijā norādītajām detaļām, piederumiem vai rezerves daļām.
2. Matračī aizsargāti ar higiēniskiem pārvalkiem, nelietojiet matračiem citus pārvalkus.
3. **NENOVĪETOJĒT** uguns avotu / karstu virsmu, piemēram, uguns, degošu cigarešu vai karstu lampu tuvumā. Lai gan ir pārbaudīta produkta atbilstība ugunsdrošības īpašībām, tas var tikt bojāts, ja nonāks saskarē ar aizdegšanās avotu.
4. Novietojiet un lietojiet produktu tā, lai tas nebūtu saspiests vai bojāts. **UZMANĪBU:** īpaši uzmanieties, lai tas netiktu saspiests starp gultas sānu margām.
5. Vienmēr pārliedzieties vai matrača izmērs ir pareizs.
6. Higiēniskais pārvalks ir ūdens necaurlaidīgs un gaisa necaurlaidīgs, taču ir tvaiku caurlaidīgs. Lai novērstu nosmakšanas risku, pārliedzieties vai pacients guļ piemērotā pozīcijā.
7. Nepieļaujiet, lai matracis tiktu bojāts ar asiem priekšmetiem.

1. Ievads

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet lietotāja instrukciju.

1.1. Vispārīga informācija

Šis produkts ir medicīniskais produkts ar CE marķējumu saskaņā ar MDD 93/42/EEC. Produkts atbilst piemērojamajiem standartiem saskaņā ar medicīnas ierīču direktīvām: SS 876 00 01, SS 876 00 02, SS 876 00 04, SS 876 00 11, SS-EN-ISO 12182, SS-EN-ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, EN 14126, EN 597-1, EN 579-2.

1.2. Pielietojums

Optimal AD matračī ir preventīvi, higiēniskie matračī, izmantojami visu veidu aprūpes vietās, paredzēti sāpju mazināšanai, izgulējumu profilaksei un kā palīg līdzekļi izgulējumu ārstēšanai.

Optimal 5zon®, Solett, Sumo AD, Cura un Cool matračī ir kombinētie matračī, kas tiek novietoti tieši uz gultas pamatnes. Optimal 5zon® BM un Solett BM ir virsmatračī, kas tiek novietoti uz jau esošajiem matračiem.

Matračiem ar Evac pārvalku ir rokturi un Velcro avārijas evakuācijas siksnas. Ja pārvalkam ir sānu rokturi, tie ir paredzēti tukša matrača pacelšanai. Citādi izmantojot matraci, jūs pats uzņematies risku un tad produktam netiek sniegta nekāda garantija.

1.3. Evakuācijas instrukcijas

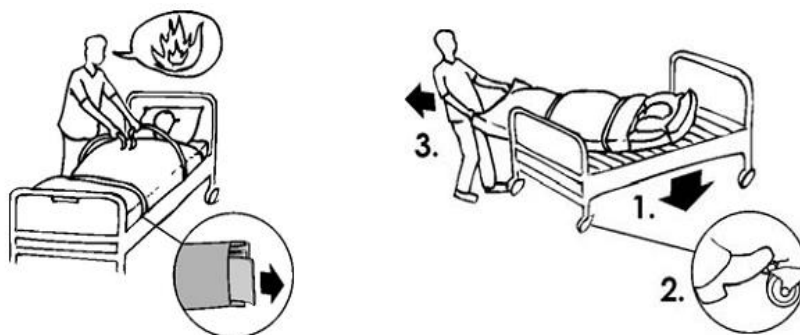
Evac ir matrača pārvalks, kurā ir integrēta funkcija pacientu ar ilgstošu gultas režīmu evakuācijai. Ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas gadījumā nav laika domāt, ko darīt tālāk. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai drošības iekārtas, kā arī evakuācijas procedūras būtu iepriekš labi izplānotas un zināmas.

Evac matrača pārvalkam ir trīs rokturi galvgalī un kājgalī. Sānos ir rokturi ar Velcro siksnām. Šīs siksnas ir paredzētas, lai piestiprinātu pacientu pie matrača pirms evakuācijas sākuma. Siksnas ir salocītas matrača sānos esošajās aizsardzības kabatās ar izvirzītiem galiem, lai tās varētu viegli izvilk.

BRĪDINĀJUMS!

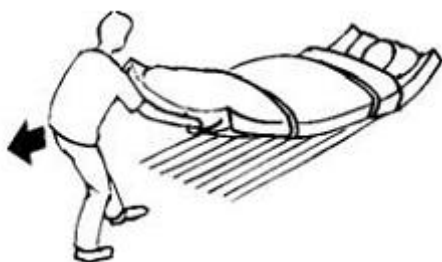
Personām, kuras veic evakuāciju, jābūt pienācīgi apmācītām. Vienmēr, pirms sākat evakuāciju, pārbaudiet iekārtu, pārvalku un matraci, lai nodrošinātu drošu evakuāciju.

Evakuācijas instrukcijas



Novilkšana no gultas

- Informējiet pacientu par to, kas notiek.
- Nolaidiet gultu un nofiksējiet.
- Izvelciet un nostipriniet Velcro siksnas tā, lai matracis izveido ap pacientu caurules formu.
- Izmantojot matrača kājgalī esošos ārējos rokturus, novelciet matraci no gultas.
- Lēnām novietojiet pacientu uz zemes.



Uz līdzenas virsmas

- Izvelciet ārējos rokturus, esošus matrača kājgalī.
- Darba pozīcijai ir jābūt ar nelielu slīpumu uz leju.

Vilkšana lejup pa kāpnēm

- Ejiet atmuguriski, kamēr galvenā matrača daļa nolaidīsies no augšējā pakāpiena.
- Pagrieziet pacientam muguru un skatieties kustības virzienā.
- Ar vienu roku turieties pie kāpņu margām un ar citu roku velciet aiz vidējā matrača roktura.
- Kāpiet lejup pa kāpnēm. Ir svarīgi saglabāt ātrumu neskrīenot.



Mācības / prakse

Par ko ir jāpadomā mācību laikā.

Novilkšana no gultas:

- Gultā guļošam pacientam nevajadzētu gulēt pašā matrača augšdaļā, jo pastāv risks, ka velkot var ievainot viņa galvu pret gultu.

Vilkšana lejup pa kāpnēm:

- Lai apgūtu tehniku, sāciet no tukša matrača vilkšanas lejup pa kāpnēm.
- Ja jūs mācaties pacientam guļot uz matrača, galvgalī rokturus var nostiprināt ar virvi. Vēl viens cilvēks var iet aiz jums un palīdzēt, ja rodas problēmas.
- Ir ieteicams mācīties uz tām pašām kāpnēm, pa kurām notiks evakuācija.

Kopumā:

Galvenais apmācību mērķis ir nevis sasniegt lielu ātrumu, bet apgūt pareizu tehniku.

Mācību pārvalki

- Sakarā ar lielu iekārtas saspīlējumu evakuācijas laikā, mācību beigās vienmēr pārbaudiet vīles un rokturus. Mēs iesakām mācībām izmantojamo iekārtu marķēt ar uzrakstu "mācību iekārta" un to izmantot tikai šim nolūkam.

Paskaidrojumi

- Ja nelieto Velcro siksnu, pastāv risks, ka pacients noslīdēs / novelsies no matrača.
- Vilkšana aiz gala samazina spriedzi tam, kurš velk, un tas nozīmē, ka evakuācija var būt ātrāka un drošāka.
- Vilkšana pa kāpnēm ir visgrūtākā evakuācijas daļa un šeit vajadzētu trenēties īpaši pamatīgi.
- Pacienta rokām vajadzētu būt zem Velcro siksnām. Tas samazina risku, ka nobijies pacients aiz kaut kā sagrašs.

UZMANĪBU!

Maksimālais matrača lietotāja svars ir arī svara ierobežojums, izmantojot matraci evakuācijai.

Lai nodrošinātu pienācīgu evakuācijas pārvalka funkciju, ir svarīgi regulāri pārbaudīt matrača kvalitāti.

Pārbaudiet stiprinājumus un pārliecinieties vai nav bojājumu, kas varētu radīt problēmas evakuācijas laikā.

2. Produkta apraksts un ekspluatācijas īpašības

Optimal matračī ir pieejami dažādos izmēros: 80 cm, 85 cm, 90 cm platumā un 200 cm, 205 cm un 210 cm garumā. Turklāt ir 105x200 cm un 120x200 cm izmēru matračī. Ja jums nepieciešami citi izmēri, sazinieties ar Care of Sweden.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar Care of Sweden vai savu vietējo izplatītāju.

2.1. Pārvalku piegāde

Visi pārvalki ir tā sauktie higiēniskie pārvalki. Tie ir viegli tīrāmi un izmantojami, nodrošinot visaugstākos tīrīšanas un higiēnas standartus. Pārvalki ir tvaiku caurlaidīgi, kas samazina ādas sasalšanas risku.

Pārvalks Olivia – pārvalks ar aizsargātu rāvējslēdzēju trijās pusēs. Pieejami dažādi augstumi. Krāsa pelēka vai zila.

Evac pārvalks – pārvalks ar aizsargātu rāvējslēdzēju visās četrās pusēs, dalāms (augšējā un apakšējā daļa). Funkcionāli rokturi evakuācijai, pārvietošanai un transportēšanai. Krāsa pelēka / melna.

Pārvalks Sumo – kā arī Evac pārvalks, taču bez rokturiem evakuācijai. Funkcionāli rokturi visās četrās pusēs matrača transportēšanai, krāsa pelēka / melna.

Pārvalks Nordic – pārvalks ar metinātām šuvēm un aizsargātu rāvējslēdzēju trijās pusēs. Rokturi vienā garākajā pusē matrača transportēšanai. Krāsa zila.

Pārvalks Skandic – pārvalks ar metinātām šuvēm, rāvējslēdzējs vienā pusē. Krāsa zila.

Pārvalks Quilt – dūrieniem šūts pārvalks ar rāvējslēdzēju trijās pusēs.

2.2. Produkta apraksts

Optimal 5zon®

Matracis aizstājējs, kas nodrošina lielisku spiediena izlīdzināšanu un unikālu sēdēšanas funkciju.

Funkcija: lietošanai līdz II. pakāpes (ieskaitot) izgulējumu profilaksei un ārstēšanai.

Pamatne: porolons augstas elastības pakāpes 65+50 kg/m³.

Augstums: 14 cm.

Pārvalks: Evac, Olivia, Nordic un Quilt.

Lietotāja svars: 40-130 kg.

Garantija: 3 gadi.



Integrēta sēdēšanas funkcija

Optimal 5zon® BM

Mīksts un elastīgs virsmatracis, kas tiek novietots uz jau esošā matrača. Unikāls matrača dizains nodrošina labas spiediena izlīdzināšanas īpašības.

Funkcija: lietošanai līdz I. pakāpes (ieskaitot) izgulējumu profilaksei un ārstēšanai.

Pamatne: porolons augstas elastības pakāpes 65 kg/m³.

Augstums: 6 cm.

Pārvalks: Olivia un Quilt.

Lietotāja svars: 40-130 kg.

Garantija: 2 gadi.

Optimal Cool

Matrača aizstājēj sistēma ar profilētu virsmu.

Funkcija: lietošanai līdz I. pakāpes (ieskaitot) izgulējumu profilaksei un ārstēšanai.

Pamatne: porolons augstas elastības pakāpes 35 kg/m³.

Augstums: 13 cm.

Pārvalks: Olivia, Evac, Nordic un Quilt.

Lietotāja svars: maks. 110 kg.

Garantija: 2 gadi.

Optimal Cura

Divu slāņu matrača aizstājēj sistēma, porolons augstas elastības pakāpes un viskoelastīgs porolons.

Funkcija: lietošanai līdz I. pakāpes (ieskaitot) izgulējumu profilaksei un ārstēšanai.

Pamatne: porolons augstas elastības pakāpes + viskoelastīgs porolons 50 kg/m³.

Augstums: 13 cm.

Pārvalks: Olivia, Evac, Nordic un Quilt.

Lietotāja svars: maks. 130 kg.

Garantija: 3 gadi.

Optimal Solett

Matrača aizstājēj sistēma, speciāli izstrādāta viegliem un jūtīgiem cilvēkiem.

Funkcija: lietošanai līdz I. pakāpes (ieskaitot) izgulējumu profilaksei un ārstēšanai.

Pamatne: porolons augstas elastības pakāpes 50 kg/m³ + 35 kg/m³.

Augstums: 12 cm.

Pārvalks: Olivia, Evac, Nordic un Quilt.

Lietotāja svars: maks. 60 kg.

Garantija: 2 gadi.

Optimal Solett BM

Mīksts virsmatracis, speciāli izstrādāts viegliem un jūtīgiem cilvēkiem.

Funkcija: lietošanai līdz I. pakāpes (ieskaitot) izgulējumu profilaksei un ārstēšanai.

Pamatne: porolons augstas elastības pakāpes $50 \text{ kg/m}^3 + 35 \text{ kg/m}^3$.

Augstums: 6 cm.

Pārvalks: Olivia un Quilt.

Lietotāja svars: maks. 60 kg.

Garantija: 2 gadi.

Optimal Sumo AD

Matrača aizstājēj sistēma, speciāli izstrādāta ļoti liela svara personām un unikālu sēdēšanas funkciju.

Funkcija lietošanai līdz I. pakāpes (ieskaitot) izgulējumu profilaksei un ārstēšanai.

Pamatne: porolons augstas elastības pakāpes $65 \text{ kg/m}^3 + 50 \text{ kg/m}^3$.

Augstums: 15 cm.

Pārvalks: Sumo un Nordic.

Lietotāja svars: 100-270 kg.

Garantija: 1 gads.



Integrēta sēdēšanas funkcija

3. Matrača izpakošana

Visi matrači tiek piegādāti saspiesti un iepakoti pārstrādājamā plastikā. Tie tiek saspiesti, lai mūsu klientiem būtu vieglāk tos uzturēt un lai samazinātu transportēšanas apjomu; mēs samazinām ietekmi uz vidi.

1. Vispirms pārbaudiet vai iepakojums nav bojāts. Noņemiet plastmasas maisu un visus aizsargmateriālus. Atverot iepakojumu, centieties nelietot nazi, jo varat sabojāt higiēnisko pārvalku.
2. Sakārtojiet pārvalku. Matračī, kas tiek piegādāti ar dalāmu Evac pārvalku, ir iepakoti kopā ar augšējo daļu, kas salocīta matrača iekšpusē. Atlociet augšējo daļu un aizvelciet rāvējslēdzēju.
3. Pirms lietošanas matraci vismaz 2 stundas atstāriet neatvērtu uz līdzenas virsmas. Tomēr, ja nepieciešams, matraci var izmantot nekavējoties. Var paiet vairākas nedēļas pirms matracs atgūs savu agrāko platumu / augstumu, kāds tas bija līdz saspiešanas.

4. Apkopes instrukcijas

Ja produktu izmantos cits lietotājs, ir svarīgi sekot zemāk norādītajām instrukcijām. Ja rodas šaubas, sazinieties ar personu, kas ir atbildīga par higiēnu, vai ar piegādātāju, lai viņi jums palīdzētu un sniegtu norādījumus.

SVARĪGI!

Pārbaudiet higiēnisko pārvalku katru reizi, kad to tīrat. Ja pārvalks ir bojāts, to vajag nomainīt vai salabot. Ja produktam ir Evac pārvalks, ir nepieciešams regulāri pārbaudīt rokturus un siksnas. Rūpīgi sekojiet vietējām instrukcijām un tīrīšanas speciālistu instrukcijām.

4.1 Higiēniskais pārvalks



Pārvalkus var notīrīt ar maigu mazgāšanas līdzekli (piemēram, mazgāšanas šķidrumu) un ūdeni vai šim nolūkam paredzētu dezinficējošu līdzekli uz alkohola bāzes / mazgāšanas līdzekli. Var arī izmantot Perform, Virkon vai Desisoft. Ekskrementus un asins traipus nekavējoties jānoņem ar aukstu ūdeni. Rūpīgi sekojiet vietējām instrukcijām un mazgāšanas līdzekļa lietošanas instrukcijām.



Vairāku slāņu pārvalkus pirms mazgāšanas ir jāatšķir. Mazgājiet ar līdzīgas krāsas veļu.



Mazgāšanas līdzekļiem uz hlora vai fenola bāzes var būt negatīva ietekme uz PU virsmu un no tiem ir jāizvairās. Ja tiek izmantots hlors, ieteicams maks. 1 % maisījums.

4.2 Matrača pamatne

Higiēniskais pārvalks pilnībā aizsargā porolona pamatni, tas nozīmē, ka tīrīt pamatni reti kad vajag. Ja kādu iemeslu dēļ pamatni ir jātīra, tīriet netīro vietu ar vieglu mazgāšanas līdzekli un ūdeni (piemēram, uzsmidzinot). Pamatīgi izspiediet ūdeni.

Ļaujiet matracim nožūt siltā, vēdināmā, no tiešas saules staru iedarbības pasargātā vietā. Pamatnei jābūt pilnīgi sausai pirms atkārtotas izmantošanas. Ja nepieciešams, izmantojiet dezinficējošu līdzekli uz alkohola bāzes / mazgāšanas līdzekli. Varat izmantot Perform, Virkon vai Desisoft.

Pārējais

5.1. Uzglabāšana

Uzglabājiet matraci uz līdzenas virsmas vai rūpīgi sarullētu / salocītu un aizvilktu rāvējslēdzēju. Vienmēr produktus uzglabājiet istabas temperatūrā sausā vietā. Pārliedzieties, vai produkts tiek glabāts vietā, kur tas netiks caurdurts, dauzīts vai blakus priekšmetiem, kas var izraisīt bojājumus. Izvairieties no tiešas saules gaismas iedarbības. Ja matracis ir jāuzglabā ilgāk par 3 mēnešiem, ieteicams to uzglabāt uz līdzenas virsmas (nesarullētu vai nesalocītu).

5.2. Marķējums

Produktam ir etiķete, kurā norādīts ražošanas datums, produkta numurs, izmērs, kopšanas un mazgāšanas norādījumi, EAN svītru kods, kā arī atvēlēta vieta marķēšanai.

5.3. Garantija

Vairāk informācijas par katram matracim piešķirto garantiju meklējiet 2.2. nodaļā. Garantija attiecas uz ražošanas defektiem. Garantija neattiecas uz produkta parastu nolietojumu vai stāvokļa pasliktināšanos, vai bojājumiem, kas rodas sakarā ar neuzmanīgu attieksmi pret produktu vai nepareizu tā kopšanu.

5.4. Apkalpošana un apkope

Produktam nav nepieciešama nekāda cita apkalpošana vai apkope, izņemot tīrīšanu, kā tas aprakstīts lietotāja instrukcijā.

5.5. Labojumi

Lai saņemtu instrukcijas, sazinieties ar piegādātāju.

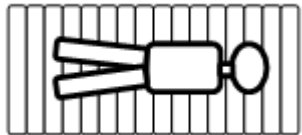
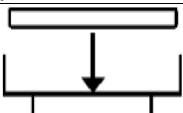
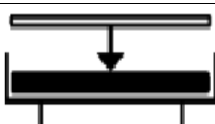
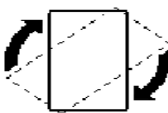
5.6. Pārstrāde

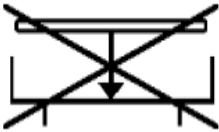
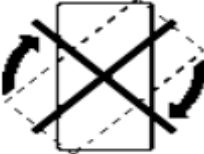
Produkti ir pilnībā pārstrādājami un tie būtu jāpārstrādā kā "dedzināmi atkritumi". Demontāža nav vajadzīga.

5.7. Atgriešana un sūdzības

Sūdzības jāiesniedz piegādātājam. Produkti tiek atgriezti saskaņā ar piegādātāja norādījumiem, un to iespējams izdarīt pēc tam, kad tiek iesniegta sūdzība. Par transportēšanas laikā izdarītiem bojājumiem ir jāpaziņo transportēšanas pārstāvim.

5.8. Simbolu skaidrojumi

XXXX-XX-XX			
Gads-mēnesis-diena	Lasīt lietotāja instrukciju	Iezemēts kontakts	CE marķējums saskaņā ar MDD93/42/EEK
			CATEGORY 1 2 3 4 
II. šķiras uzstādīšana (dubultā izolācija)	BF tipa uzstādīšana	Klasifikācija pēc uzliesmojuma	Pacienta informācija - pakāpes
	 Xkg	 >120cm	
Kāju vieta	Ieteicamais pacienta svars	Ieteicamais minimālais garums	Matracis būtu jālieto tikai gulot uz tā gareniski
			
Neizmest sadzīves atkritumos, ievērot pārstrādes instrukcijas	Pārstrāde	Garantijas laiks	
			

Tieši uz gultas pamatnes	Novietot uz esošā matrača	Iespējams apgriezt	Iespējams apgriezt otrādi
			
Netieši uz gultas pamatnes	Nelikt virsū uz esošā matrača	Neapgriezt	Neapgriezt otrādi
			
Likt augšā	Likt apakšā	Notīrīt	Negludināt
			
Var mazgāt veļas mašīnā pie 70 ° C temperatūras	Var mazgāt veļas mašīnā pie 95 ° C temperatūras	Žāvēt žāvētājā	Žāvēt neizgriežot
			
Nežāvēt žāvētājā	Ķīmiskā tīrīšana aizliegta	Hlors	Nelietot hloru

6. Piederumi

Šiem matračiem ir paredzēti vairāki piederumi. Tie ir norādīti zemāk sniegtajā sarakstā.

Evac pārvalks, augšējā daļa (Optimal 5zon®, Solett, Sumo AD, Cura, Cool)	431-xxxxxx*
Evac pārvalks, apakšējā daļa 12 cm (Optimal 5zon®, Solett, Cura, Cool)	461-xxxxxx*
Evac pārvalks, apakšējā daļa 14 cm (Optimal 5zon®)	471-xxxxxx*
Evac pārvalks, apakšējā daļa 15 cm (Optimal Sumo AD)	481-xxxxxx*
Pilns Evac pārvalks (Optimal 5zon®)	418-xxxxxx*
Pilns Evac pārvalks (Optimal Solett, Cura, Cool)	419-xxxxxx*
Pilns Sumo pārvalks (Optimal Sumo AD)	420-xxxxxx*
Pārvalks Olivia, 14 cm (Optimal 5zon®)	25-xxxxxx*
Pārvalks Olivia, 6 cm (Optimal 5zon® BM, Solett BM)	29-xxxxxx*
Pārvalks Olivia, 13 cm (Optimal Solett, Cura, Cool)	292-xxxxxx*
Pārvalks Nordic (Optimal 5zon®, Solett, Cura, Cool)	287-xxxxxx*

Maiss virsmatracim (80-90 cm platumā)	58-900904
Maiss nomaiņas matracim, 80-90 cm platumā, poliesters.	58-900902
Otimal Lufta	
80 cm platumā	401-080200
90 cm platumā	401-090200

*-xxxxxx produkta numuri apzīmē produkta izmērus. Piemēram, 29-090200 apzīmē 90x200 cm Olivia pārvalku.

6.1. Citi piederumi

Optimal pagarinājuma daļa

Pagarinājuma daļa ir piederums, kas tiek izmantots, lai aizpildītu tukšo vietu, ja gulta ir garāka par matraci. Pagarinājuma daļa var būt dažādu izmēru, atkarībā no matrača platuma un augstuma.

Optimal higiēniskais spilvens

Higiēniskais spilvens ir paredzēts apkopei, tas ir ļoti ērts un viegli tīrāms. Piegādājams kopā ar noņemamu higiēnisko pārvalku. Spilvenu izmēri ir šādi: 35x45, 50x60 un 50x70 cm.

Optimal Sens

Anatomiskas formas spilvens, kas nodrošina maksimālu atbalstu kaklam. Izgatavots no viskoelastīga porolona un piegādājams ar noņemamu higiēnisku pārvalku.

Curera® atbalsts

Līdzeklis pozīcijas uzturēšanai un pozīcijas maiņai. Atbalsts ir viegli izmantojams ar noņemamu, šķidruma izturīgu, higiēnisku pārvalku.

Molly papēžu aizsargs

Molly ir paredzēts, lai nodrošinātu ērtu atbalstu papēžiem. Lietotājs var kustināt kāju un mainīt pozīcijas. Tam ir noņemams, šķidruma izturīgs higiēniskais pārvalks. Molly ir pieejami trīs izmēri: mazs, vidējs un liels.

Curera® pozīciju regulēšanas spilveni

Curera® ir spilveni, kas tiek izmantoti pozīciju regulēšanai, spiediena samazināšanai un atbalstam visu veidu aprūpes iestādēs. Kad cilvēki ar ilgstošu gultas režīmu nekustas pietiekami daudz, palielinās izgulējumu veidošanās risks. Regulāri mainot pozīcijas, šis risks tiek samazināts un tiek paaugstināts komforta līmenis.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par mūsu produktiem, sazinieties ar Care of Sweden vai savu vietējo izplatītāju.

Ražots

Care of Sweden

Kontakti:

Tālr.: +46 771 106600
Fakss: +46 325 12840
E-pasts: info@careofsweden.se
Internets: www.careofsweden.com

Adrese:

Care of Sweden AB
Box 158
SE-512 24 Svenljunga
Zviedrija

Apmeklējumu / kravu adrese:

Boråsvägen 14
SE-512 53 Svenljunga
Zviedrija

Piegādātājs

UAB "Slaugivita"

Dubijos ielā 16, 77172 Šauļi, Lietuva
Tālr. +370 41 522439
Fakss +370 41 595279
E-pasts: info@slaugivita.com
www.slaugivita.com

© Care of Sweden AB, 2011

Care of Sweden, Optimal 5zon, CuroCell un Curera ir Care of Sweden AB preču zīmes.

Pārdevējs: UAB "Slaugivita"
GARANTIJAS TALONS

Iekārtas nosaukums Porolona matracis ar medicīnisku pārvalku izgulējumu profilaksei un ārstēšanai un pozicionēšanas spilventiņiem (komplekts)

Modelis: Prima 12 85x200x13 cm

Sērijas Nr. _____

Pārdošanas datums: _____ PVN rēķini faktūras LAT Nr.: _____

Pārdevēja uzvārds _____ Paraksts _____

Šim pārdodamam produktam tiek sniegta garantija - ____24____ no pārdošanas brīža. Garantijas laikā bojājumi, kas saistīti ar produkta materiāla kvalitāti vai ražošanas brāķi, tiks novērsti bez maksas.

Garantija neattiecas uz:

Neatbilstošas apkopes gadījumā: par iegādātā produkta (ierīces) ikdienas apkopi ir atbildīgs īpašnieks vai viņa pilnvarots pārstāvis. Ja bojājuma rašanās ir saistīta ar nolaidīgu apkopi, pārdevējs patur tiesības atteikt garantijas gadījumu apstiprināšanu.

Pārslodzes un nepareizas izmantošanas gadījumā: t. i., ja produkts (ierīce) tiek izmantots, pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus, tiek izmantoti citiem mērķim vai tīša bojājuma gadījumā.

Modifikācijas gadījumā: ja tiek mēģināts izjaukt, remontēt, modificēt produktu (ierīci) bez pārdevēja servisa piekrišanas vai tika izmantoti nepiemēroti vai sliktas kvalitātes piederumi.

Citos gadījumos: ja produkts (ierīce) tiek salauzts vai sabojāts ugunsgrēka, ūdens appliešanas (plūdu), zemestrīces un citu stihisku nelaimju gadījumos.

Garantija attiecas tikai uz ierīces bojājumiem. UAB "Slaugivita" neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas izdarīts citam īpašumam vai personām. Garantija ir derīga, uzrādot šo garantijas talonu un pirkumu apliecināšanas dokumenta kopiju.

Uzmanību: garantijas derīguma periodā nedarbojošos produktus paņems kurjeri. Tāpēc bojāto produktu lūdzam iepakot (vēlams tā oriģinālajā iepakojumā) un nodot mūsu kurjerim. Kad defekts tiks novērsts, prece tiks nosūtīta atpakaļ.

Garantijas nosacījumus esmu izlasījis un piekrītu:

Pircēja paraksts _____

Garantijas apkalpošana pa tālr.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. Bojājums _____

Datums: _____

Izmantotās detaļas: _____

Serviss _____
(Amats, vārds, uzvārds, paraksts)